

permobil

Physio Postural Backrests

Progeo, leader nella produzione di carrozzine attive, completa la propria gamma di prodotti con gli schienali Physio, un eccellente sistema posturale per il tronco.

Physio si distingue per quel design esclusivo ed elegante, peculiarità da sempre collegata al marchio Progeo.

L'innovativo sistema di regolazione ne facilita l'applicazione e l'adattamento in ogni tipologia di carrozzina.

Grazie alla cospicua disponibilità di gusci sarà possibile una personalizzazione del sistema attraverso l'individuazione della forma anatomica più idonea al soggetto, assicurando allo stesso il massimo sostegno e confort.

Progeo, leader company in active wheelchairs production adds to its wide range of products Physio, an innovative trunk postural system.

Physio stands out for its own exclusive and elegant design that has always characterised Progeo's products and company's style.

The innovative adjustment system facilitates its assembly and makes it suitable to every kind of wheelchair.

Thanks to its wide range of shells, it will be possible to customize the system through singling out the most suitable anatomical shape for each user and thus ensuring the best support and comfort.



Physio AIR

Guscio in fibra di carbonio estremamente leggero e resistente, ideale per le persone attive e/o sportive. Disponibile in due forme, Regular ed Ala Alta, per un miglior controllo del tronco.

Extremely light carbon fibre shell, ideal for active and/or sporty users. Available in two shapes, Regular and High wing, for a better trunk control.



Larghezza schienale (cm) Backrest width (cm)	Adattabile per larghezza carrozzina (cm) Suitable for wheelchair's width (cm)
36	33 → 39
39	36 → 42
42	39 → 45
45	42 → 48



Regular



Ala alta / High wing

Physio POSTURE

Guscio in alluminio, ideale per gestire al meglio anche le situazioni più complesse.

Aluminium shell, ideal to cope with more complex situations.



Larghezza schienale (cm) Backrest width (cm)	Adattabile per larghezza carrozzina (cm) Suitable for wheelchair's width (cm)
36	33 → 39
39	36 → 42
42	39 → 45
45	42 → 48
48	45 → 51



Regular



Physio KID

Guscio in alluminio, è stato concepito per la stabilità ed il comfort del bambino.

Aluminium shell, it is designed for the child's stability and comfort.



Larghezza schienale (cm) Backrest width (cm)	Adattabile per larghezza carrozzina (cm) Suitable for wheelchair's width (cm)
30	27 → 30
33	30 → 33
36	33 → 36



33 h34

Imbottitura / Upholstery

Imbottitura molto confortevole, traspirante e leggera. Bordo e marchi riflettenti.

Very comfortable, breathable and light upholstery. Reflectant edge and marks.



Pad deep / Deep pad

Pad di contenimento laterale per configurazione Deep. Ambidestro, in due misure, regolabile in altezza, consente di trasformare lo schienale Air, Posture e Kid in uno schienale più contenitivo nei punti necessari estendendo il profilo del guscio e dando continuità all'imbottitura dello schienale.

Side restraint Pad for Deep configuration. Ambidextrous, in two sizes, height adjustable, it allows to transform the Air, Posture and Kid backrests in a deep contour backrest where necessary by extending the shell's profile and giving continuity to the upholstery.



Ampia regolazione in altezza.
Ample height adjustment.



Contenimento esteso con due pad sullo stesso lato.
Extended restraint with two pads on the same side.



Spinte Swing Away / Swing Away Laterals

Le spinte laterali swing away sono state progettate per poter offrire un corretto e confortevole supporto anche nei casi più complessi grazie alle multiple regolazioni in altezza, profondità ed inclinazione.


The swing away laterals are designed to offer a correct and comfortable support even in more complex cases thanks to its multiple adjustments in height, depth and inclination.



Hardware con snodo a sfera e asole di regolazione.
Hardware with ball joint and adjustment slots.



Hardware con due snodi a sfera.
Prolunga 65 mm con regolazione di ulteriori 20 mm.
Hardware with two ball joints.
65 mm extension with additional 20 mm adjustment.

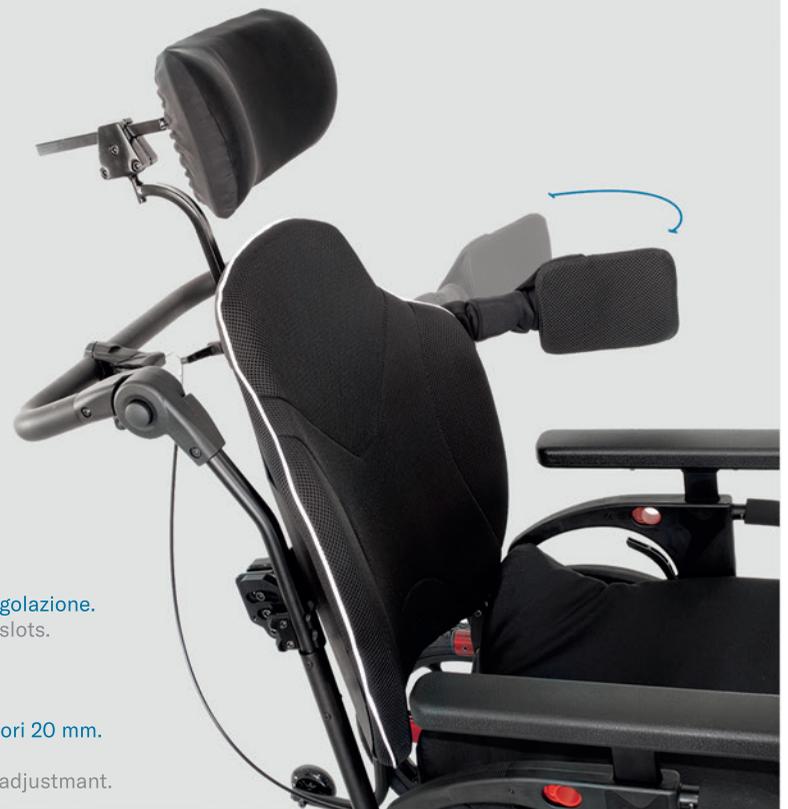

Poggiatesta / Headrest

Sistema multiregolazione a doppia sfera per l'individuazione della posizione desiderata, imbottitura avvolgente in due larghezze (28 e 34 cm).

Multadjustment system with double ball to reach the necessary positioning, contoured pad in two sizes (28 e 34 cm).



Sfere di regolazione
Adjustment balls

Regolazione altezza
Height adjustment


Hardware

Sicuro, affidabile, compatto e con morsetti che si adattano a tubi dello schienale da 18 a 26 mm di diametro, il sistema di aggancio permette ampie regolazioni in altezza, inclinazione e profondità.


Safe and reliable, the clamps are suitable to backrest tubes from 18 to 26 mm of diameter. The hardware allows for ample adjustment in height, angle and depth.



Stesso morsetto per tubi differenti da Ø18 a Ø26.
Same clamp for tubes from Ø18 to Ø26.

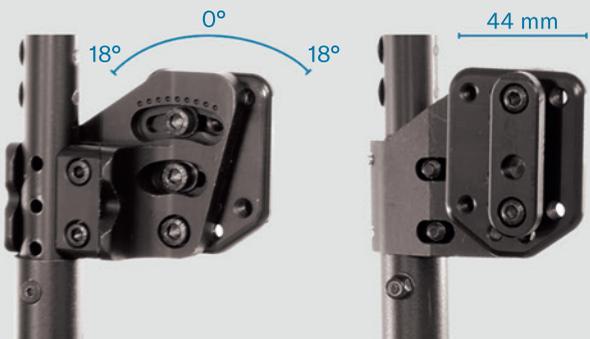

Regolazione dell'inclinazione e della profondità.
Angle and depth adjustment.

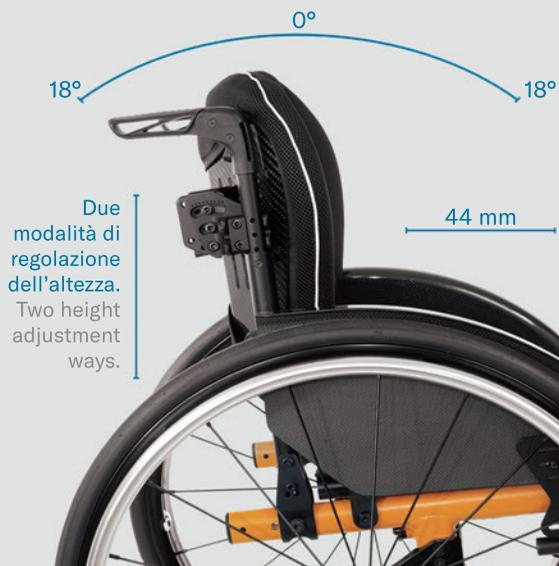

Due modalità di regolazione dell'altezza.
Two height adjustment ways.

Regolazione altezza a scorrimento verticale, profondità e inclinazione.
Sliding height adjustment, stepless angle adjustment and guided depth adjustment.

Aggancio e sgancio / Mounting and removing

Un sistema innovativo, minimalista ed estremamente leggero che agevola notevolmente le operazioni di aggancio e sgancio.

A minimalist, ultra-light innovative system that remarkably facilitates the mounting and removing operations.



Air con sistema fisso / Air with fixed system

Physio Air fisso per un look più leggero ed esclusivo della tua carrozzina rigida Progeo. Consente la regolazione in altezza, 10 mm in profondità e 20° di inclinazione.

Physio Air for a lighter and more exclusive look of your Progeo rigid frame wheelchair. It allows for adjustment in height, 10 mm in depth and 20° in inclination.



permobil

Rehateam S.r.l.
Vicolo Negrelli, 5, 31038 - Castagnole di Paese (TV) - Italy
Tel. +39 0422 484657; +39 0422 480387
customer_support_it@permobil.com
permobil.it

